

クーデックエイミーPCA スマートフォン用アプリケーション

エイミーズウィンドウ インストールガイド(ダウンロード版)

このガイドでは以下の内容を記載しています。

- ・エイミーズウィンドウを**新規インストール**する手順。
- ・エイミーズウィンドウがインストールされている携帯端末に、新しいバージョンのエイミーズウィンドウをインストール（**バージョンアップ**）する手順。

※このインストールガイドでは、推奨携帯端末である SH-M15 と Windows10 搭載 PC の組み合わせを例に説明しています。携帯端末、OS バージョンの違い、又は環境設定の違いにより、表示や操作方法等が記載と異なる場合があります。詳細に関しては、ご利用機器の取扱説明書をご確認ください。

- (1) ダウンロードページにコムタッチ製造番号とパスワードを入力し、エイミーズウィンドウのソフトウェアマスタ(V*.**_jp.co.daiken_iki.amys_window-Signed.apk)をダウンロードします。




The image shows a composite of three elements: the application logo, a screenshot of the app's main screen, and a form for downloading the APK. The logo on the left features the text 'Amys Window' and 'エイミーズウィンドウ' above an illustration of a drip chamber and tubing, with 'COOPDECH' at the bottom. The screenshot in the center shows a mobile app interface with a top status bar displaying '00000041' and a battery icon at 100%. Below the status bar, there are two tabs: '停止中' (Stopped) and '持続' (Sustained). The '持続' tab is active, showing a flow rate of '5.0 mL/h', a remaining volume of '200.0 mL', and a calculated volume of '0.35 mL'. It also indicates 'PCA回数 (総数/実数) 0 / 0' and a green checkmark next to '輸液No. 200414002'. At the bottom of the screenshot are buttons for '設定変更', '新規設定', '看護記録', '開始', 'プライミング', '電源オフ', '積算量クリア', and 'スタンバイ'. To the right of the screenshot is a text block explaining that the app is for Android and can be used to operate the PCA unit. Below this is a form with two red-bordered input fields: 'コムタッチ製造番号:' containing 'C201030000001A' and 'パスワード:' which is empty. A 'ダウンロード' button is located below the password field.

コムタッチ製造番号とパスワードは、コムタッチの裏面に記載があります。



- (2) 携帯端末と PC を USB ケーブルで接続します。
 コムタッチ同梱の USB ケーブルをご使用ください。

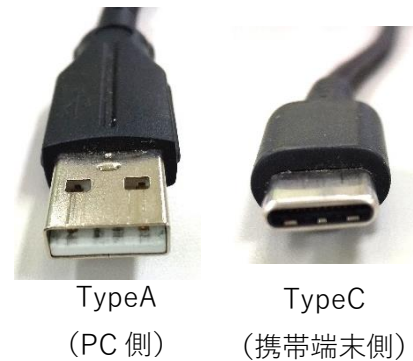

- (3) 携帯端末をファイル転送モードにします。
 【「USB の設定」画面が表示された場合】
 [ファイル転送]をタップします。



※ご利用の携帯端末によっては、「USB の設定」画面が表示されない場合があります。
 通知をタップすることで、表示される場合があります。
 詳細はご利用の携帯端末の取扱説明書をご確認ください。

①スワイプして通知を表示




②通知をタップ



③通知をタップ


【「ファイル転送を有効にする」ダイアログが表示された場合】

[OK] をタップします（複数回表示される場合がありますが、すべて [OK] をタップしてください）。

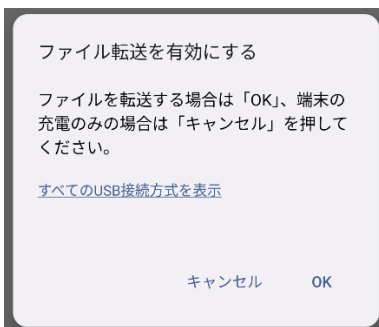

(4) **PC を使用して**、以下の操作を行います。

ダウンロードした[V*.*.*_jp.co.daiken_iki.amys_window-Signed.apk]を携帯端末の「内部共有ストレージ」にコピーします。

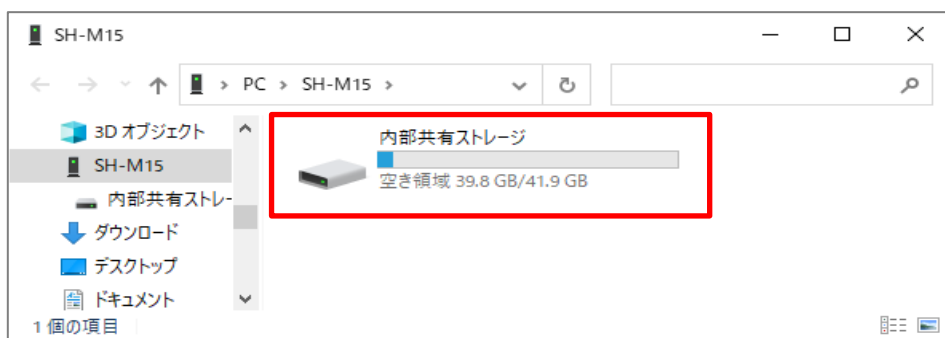

(5) 携帯端末を使用して、以下の操作を行います。

①ホーム画面を表示してから、[設定アプリ]をタップし、起動します。

②[ストレージ]→[ファイル]とタップします。

※携帯端末が KC-S302 の場合は、さらに以下の操作を行ってください。

左上の≡をタップします。

KC-S302 をタップします。


③[V*.*.*_jp.co.daiken_iki.amys_window-Signed.apk]をタップします。

④ダイアログが表示されたら、[次へ]をタップします。

※携帯端末によっては、④- 2 に示すダイアログが表示される場合があります。本ダイアログが表示された場合、[設定]をタップし、[提供元不明アプリのインストールを許可する]をオンにしてください。その後③の画面へ戻り、インストールを再開してください。

⑤ダイアログが表示されたら、[インストール]をタップします。

※携帯端末によっては、⑤- 2 に示すダイアログが表示される場合があります。本ダイアログが表示された場合は、[同意する]をタップして次に進むことを推奨します。

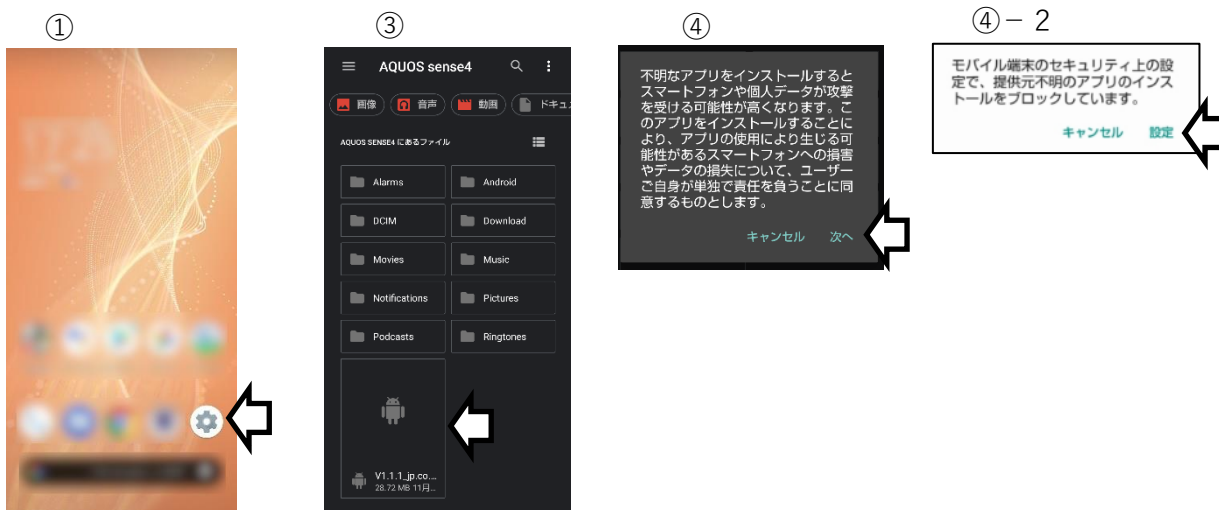


⑥インストールが完了したら、[完了]をタップします。


⑤（新規インストール時）




⑤-2

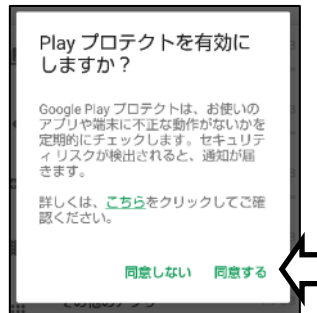

⑥

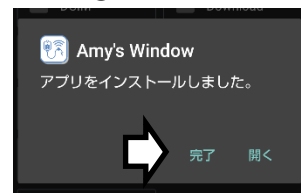

⑤（バージョンアップ時）

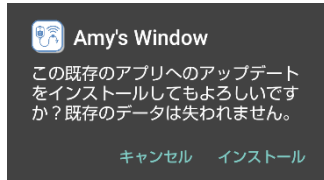

(6) 必要に応じて、ホーム画面にエイミーズウィンドウのショートカットを作成してください。

※携帯端末によっては、インストール時にエイミーズウィンドウのアイコンが、ホーム画面に自動で作成されます。


※ショートカットの作成方法については、携帯端末の取扱説明書を確認してください。

(7) エイミーズウィンドウアイコンをタップします。

※携帯端末の OS のバージョンが新しい場合、(7)-2 に示すダイアログが表示される場合があります。

本ダイアログが表示された場合は、ご利用の携帯端末が利用可能か弊社担当者までお問い合わせください。その際、携帯端末のメーカー、品番及び OS バージョンをお知らせください。

[OK]をタップすると次に進みます。

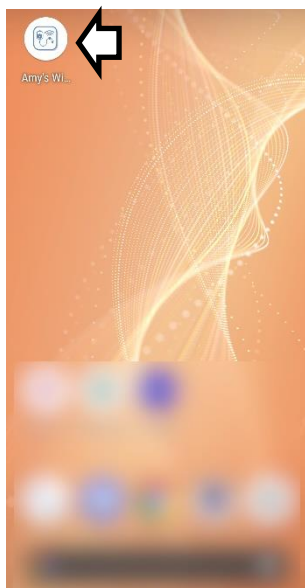

(7) - 2



(8) 付近のデバイスに関する権限取得ダイアログが表示されたら、[許可] をタップします（携帯端末の Android バージョンが 12 以上の場合のみ）。

(9) デバイス内の写真やメディアへのアクセス許可を求めるダイアログが表示されたら、[許可] をタップします（携帯端末の Android バージョンが 11 以下の場合のみ）。

(10) 写真と動画の撮影許可を求めるダイアログが表示されたら、[許可] をタップします。

(11) 通知の許可を求めるダイアログが表示されたら、[許可] をタップします（携帯端末の Android バージョンが 13 以上の場合のみ）。

(12) ソフトウェア利用許諾契約を確認し、ご理解いただいた上で[同意する]をタップします。

以上でインストールとセットアップは完了です。

エイミーズウィンドウの詳細な使用方法については、エイミーズウィンドウの取扱説明書をご確認ください。最新の取扱説明書は、弊社 Web ページからダウンロードできます。

※P.4 (5)の④で[提供元不明アプリのインストールを許可する]をオンにした場合、[提供元不明アプリのインストールを許可する]をオフに戻してください。

※コムタッチをコントローラに接続するときは

以下の操作を行い、コムタッチ(USB デバイス)の使用を許可してください。


① [FT230X Basic UART を接続したら常に Amy's Window を起動する]にチェックを入れます。

②[OK]をタップします。


※2回目以降は、本ダイアログは表示されず、自動的にコムタッチが使用できるようになります。

※別のコムタッチを接続時には本ダイアログが再度表示されますので、同様の操作を行ってください。


※携帯端末によっては、③のように表示が異なる場合があります。

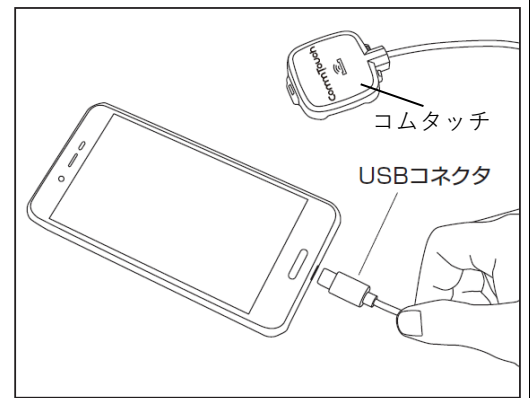

①チェック

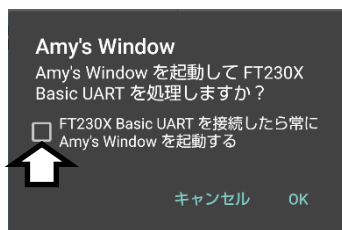

②タップ

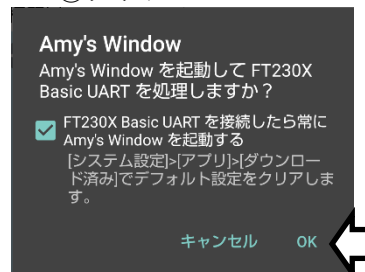

③

